



We care for healthy smiles

# Produktkatalog 2013/2014



## We care for healthy smiles

TePe arbeitet aktiv an einem erhöhten Bewusstsein für Mundhygiene und der Vorbeugung von Mundkrankheiten. Die qualitativ hochwertigen Produkte wurden für bestmöglichen Nutzen und Funktion entworfen, die maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Mundhygienebedürfnisse ermöglichen.

Die Produktentwicklung beruht auf Forschungsergebnissen und einer engen Zusammenarbeit mit zahnmedizinischen Spezialisten weltweit.



## Zahnbürsten

TePe Supreme™	5
TePe Nova	5
TePe Select™	5
TePe Classic™	5
TePe Select™ Compact	5
TePe Mini™	5
TePe Graphic™	6
TePe Zoo™	6
Zubehör für Zahnbürsten	6
Werbeartikel	7
TePe PlaqSearch™	9



## Interdentale Reinigung

TePe Interdentalbürsten Original	12
TePe Interdentalbürsten X-soft	13
TePe Angle™	14
Zubehör für Interdentalbürsten	16
TePe Gingival Gel	18
TePe Interdental Gel	19
TePe Mini Flosser™	21
TePe Dental Floss	21
Tepe Multifloss	21
TePe Zahnholzler	21



22–25



zur Verfügung gestellt von Gebrauchz.info

26–31



32–33

## Spezialprodukte

## Anwendungsbereiche

## Demonstrationsmaterial

---

TePe Implant Care™	23
TePe Implantat/Orthodontiebürste	23
TePe Bridge & Implant Floss	23
TePe Compact Tuft™	24
TePe Interspace™	24
TePe Special Care™	24
TePe Gentle Care™	24
TePe Zungenreiniger	25
TePe Extra Grip	25
TePe Prothesenbürste	25

---

Implantatpflege	26
Orthodontiepflege	28
Kinderzahnpflege	30

---

Mini Display	32
Interdentalbürsten Display	32
Produktkoffer	32
Praktische TePe Kits	32
Zahnmodell	32
Informationsmaterial	32
Sortiments-Display, groß	33
Sortiments-Display, medium	33
Tisch-Display, medium	33
Prophylaxe-Flipchart	33
Sortiments-Display, klein	33
Tisch-Display, klein	33

# Zahnbürsten

Die benutzerfreundlichen Zahnbürsten von TePe wurden für eine effektive und sanfte Plaqueentfernung entwickelt. Die große Auswahl an Bürstenköpfen, Borsten und Griffen erleichtert die tägliche Mundpflege für Erwachsene und Kinder.





Für weitere Informationen  
QR-Code scannen






### TePe Supreme™ — doppelter Reinigungseffekt

Verschieden hohe Borstenfelder für eine bessere Zugänglichkeit. Die langen Borsten gelangen tiefer zwischen die Zähne, während das kürzere Borstenfeld zur schonenden Reinigung der restlichen Zahnflächen dient. Der rutschfeste Griff sorgt für einen besseren Halt der Zahnbürste. Härtegrad: x-soft.

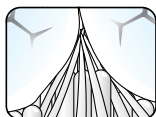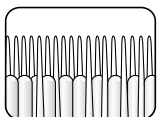

### TePe Nova — mit effektivem Tip

Die Nova Zahnbürste hat einen Tip für schwer zugängliche Flächen. Kräftiger, rutschfester Griff mit Daumenmulde für einen besseren Halt. Pink: x-soft. Gelb: soft. Blau: medium.

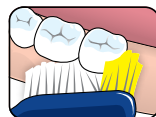

### TePe Select™ – für Jedermann

Diese qualitativ hochwertige Zahnbürste mit konischem Bürstenkopf und ergonomischem Griff eignet sich für Jedermann. In unterschiedlichen Härtegraden: x-soft, soft und medium.

### TePe Select™ Compact

Beliebt bei Kindern und Erwachsenen, die einen kleinen Bürstenkopf bevorzugen. Diese Zahnbürste mit benutzerfreundlichem Griff ist in drei verschiedenen Härtegraden erhältlich: x-soft, soft und medium.

### TePe Mini™ – von Anfang an

TePe Mini hat extra weiche, schonende Borsten und einen schmal zulaufenden Bürstenkopf. Erhältlich in fröhlichen Farben und mit tollen Motiven für Kinder. Ideal für Kinder bis 4 Jahre. Härtegrad: x-soft.



### TePe Classic™


Die TePe Classic hat einen rechteckigen Bürstenkopf und den gleichen benutzerfreundlichen Griff wie die Select Zahnbürsten. Die Classic Zahnbürste wird bei Erwachsenen empfohlen, die einen größeren Bürstenkopf bevorzugen. Erhältlich in x-soft, soft und medium.

### TePe Gentle Care™ – für sensible Zähne

Durch die ultrasofte Borsten ist die tägliche Zahnpflege mit einer TePe Gentle Care besonders schonend. Weitere Informationen auf Seite 24.



Select Zahnbürsten haben einen konischen Bürstenkopf für optimalen Zugang, sanfte Borsten und einen ergonomischen Griff. Der Griff ist aus umweltfreundlichen Polypropylen.

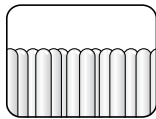

Für eine schonende Reinigung sind die Borsten abgerundet.



Alle Zahnbürsten können für einen besseren Zugang gebogen werden (unter heißem Wasser).

## Zubehör für Zahnbürsten

Schutzkappen und Reiseköcher passen für die meisten TePe Zahnbürsten und Spezialbürsten.



## TePe Graphic™

TePe Select gibt es auch mit modernen Blumen-Illustrationen. Härtegrad: soft.

Wir bieten die Select Zahnbürsten auch mit saisonalen Motiven an.



ab 3 Jahren

## TePe Zoo™ – für die Kleinen

Eine Select Compact Zahnbürste mit kleinem Bürstenkopf und lustigen Tiermotiven – geeignet für Kinder ab 3 Jahren.

Der lange Halter, welcher gut in kleine Kinderhände passt, ermöglicht den Eltern, die Kinder beim Zähneputzen zu unterstützen. Härtegrad: x-soft.



0-4 Jahre

## TePe Mini™

TePe Mini ist erhältlich mit tollen Motiven vom schwedischen Isa Form. Empfohlen ab dem ersten Zahn. Härtegrad: x-soft.

# TePe Werbeartikel

Clever vermarkten – Nutzen Sie die bedruckbaren Zahnpflegeartikel von TePe für Ihre Werbebotschaft.



Select und Select Compact gibt es in vielen verschiedenen Farben.

Logos, Illustrationen und Botschaften als Druck auf die Select und Select Compact Zahnbürsten sowie auf die Zahnhölzer und Taschenetuis ermöglichen Ihre individuelle Werbebotschaft. Sie haben die Wahl aus einer breiten Palette verschiedener Zahnbürstenfarben und einer Bedruckung mit bis zu fünf Farben. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit von vielfältigen Kombinationen. Wir helfen Ihnen gerne mit Vorschlägen und kreativen Ideen.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.tepe.com](http://www.tepe.com).





Neu



## TePe PlaqSearch™


TePe PlaqSearch™ ist ein Zweifarben-System, das Plaque anzeigt, indem es neue Plaque rot und alte Plaque blau färbt. Es zeigt deutlich die Bereiche, die besondere Pflege benötigen. PlaqSearch wird in der Zahnarztpraxis zur Patientenweisung und als didaktisches Instrument zum richtigen Zähneputzen verwendet. Es kann auch zuhause für die eigene Kontrolle und verbesserte Zahnpflege-Routine verwendet werden.

PlaqSearch gibt es in Form von Tabletten, erhältlich für den Einsatz in der Praxis und für zuhause, sowie als Lösung für den professionellen Einsatz.

- Pädagogische und einfache Methode, um Plaque zu visualisieren
- Unterscheidet neue und alte Plaque
- Hilft, Karies und Gingivitis vorzubeugen



Lösung tropfenweise in eine hygienische Schale geben.

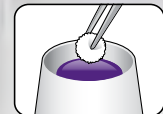

Wattebausch in die Lösung dippen und anschließend auf den Zahnoberflächen verteilen.



Rot: neuere Plaque  
Blau: ältere Plaque



# Interdentale Reinigung

TePe hat eine lange Tradition in der Entwicklung von Produkten für die Zahnprophylaxe mit besonderem Fokus auf die interdentale Reinigung. Die Auswahl von Interdentalbürsten ist umfangreich, mit einer Auswahl an Bürsten, Borsten und Design, um den Anforderungen von zahnmedizinischen Spezialisten und Patienten weltweit gerecht zu werden.




# TePe Interdentalbürsten


Die Verwendung von Interdentalbürsten hat sich als die effektivste Methode bei der Entfernung von Plaque zwischen den Zähnen gezeigt. TePe Interdentalbürsten werden in Zusammenarbeit mit Zahnärzten entwickelt, um die höchste Effizienz, Komfort und Qualität zu garantieren.

Das breite Sortiment bietet Produkte für jeden:


- Verschiedene Größen
- Wahl der Grifflänge und Winkel
- Verschiedene Borstenstärken
- Farbcodierung für einfache Identifikation der Größe
- Griffe aus recyclebarem Polypropylen

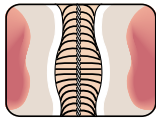

Die Auswahl der passenden Größe ist sehr wichtig. Die Borsten sollen den Approximalraum ausfüllen, der Drahtkern soll den Zahn jedoch nicht berühren.

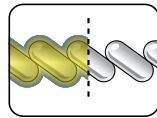

Alle Größen sind kunststoffummantelt.

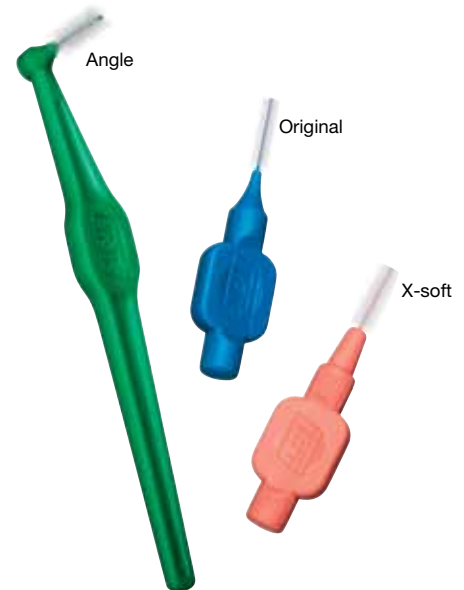

TePe Interdentalbürsten entsprechen dem ISO-Standard

TePe Interdentalbürsten wurden auf Qualität und Haltbarkeit getestet und entsprechen allen geforderten Vorgaben des internationalen Standards für manuelle Interdentalbürsten: ISO 16409:2006 Amd1:2010.

Laut ISO-Standard werden die Interdentalbürsten nach der Gängigkeit in den kleinsten Approximalraum eingeteilt (PHD, passage hole diameter).

Original									
X-Soft									
Angle									
Farben	Pink	Orange	Rot	Blau	Gelb	Grün	Lila	Grau	Schwarz
ISO-Größe (0-7)	0	1	2	3	4	5	6	7	7
Drahtdurchmesser (mm)	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1,1	1,3	1,5
PHD (mm)	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,6	2,0	2,6	3,4

Die Anwendung einer Interdentalbürste zusätzlich zum Zähneputzen entfernt mehr Plaque als Zähneputzen allein und reinigt effektiver als Zahnseide oder Zahnhölzer beim Entfernen von Zahnbelag. Studien haben gezeigt, dass die Verwendung von Interdentalbürsten einen positiven Effekt auf die Plaquewerte, Blutungsindizes und Taschentiefen hat.


Slot DE, et al.

The efficacy of interdental brushes on plaque and parameters of periodontal inflammation: a systematic review.  
*Int J Dent Hyg* 2008;6:253-264.




## TePe Interdentalbürsten – Original



Die TePe Interdentalbürsten umfassen neun farbcodierte Größen - passend für jeden Interdentalraum. Alle Größen haben einen kunststoffummantelten Draht für Sicherheit und Komfort. Der benutzerfreundliche Griff bietet stabilen Halt, was die Reinigung mit kontrollierten Bewegungen ermöglicht. Die kleineren Bürstengrößen (ISO 0-3) haben einen flexiblen Bürstenschaft für optimalen Zugang und erhöhte Haltbarkeit. Die größeren Größen (ISO 4-7) haben einen dickeren Draht, der sich für eine bessere Zugänglichkeit im Molarenbereich biegen lässt.

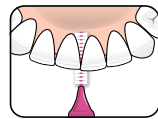


Interdentale Reinigung der Vorderzähne.

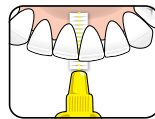


Interdentale Reinigung der hinteren Zähne.

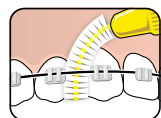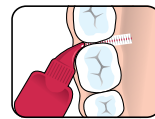


Multibandapparat

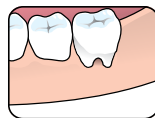

Furkationgrad III

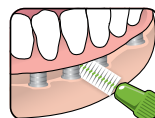

Implantate

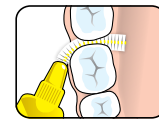

Zahnverlust



Distalfäche vom letzten Zahn.

Interdentalbürsten haben eine größere plaquereduzierende Wirkung in den Approximalräumen als Zahnhölzer und Zahnseide.

**Särner B, et al.**

Recommendations by dental staff and use of toothpicks, dental floss and interdental brushes for approximal cleaning in an adult Swedish population.

*Oral Health Prev Dent 2010;8:185-194.*



## TePe Interdentalbürsten – X-soft

Die speziell ausgewählten langen und extra weichen Borsten sind raumfüllend und schonend für die Papille. Die Pastellvariationen der TePe Interdentalbürsten X-soft stimmen mit den Farben der originalen Interdentalbürsten überein, beginnend bei ISO-Größe 1. Alle sechs Größen sind kunststoffummantelt, um eine schonende Reinigung zu garantieren.

Anwendungsbereiche:

- Nach chirurgischen Eingriffen
- Für empfindliche Zahnhäule und Zahnfleisch
- Bei Mundtrockenheit
- Nach PA-Behandlungen
- Und für alle, die eine extra weiche Interdentalbürste bevorzugen



Die luftdurchlässige Schutzkappe kann als hygienischer Schutz und auch zur Griffverlängerung verwendet werden.

Für weitere Informationen  
QR-Code scannen





## TePe Angle™


TePe Angle wurde für eine kontrollierte und gründliche Reinigung der Zahnzwischenräume entwickelt. Sie hat einen abgewinkelten Bürstenkopf für einen leichteren Zugang, vor allem zwischen den hinteren Zähnen von palatinal und lingual. Der lange und flache Griff bietet einen stabilen und ergonomischen Halt. TePe Angle ist eine gute Wahl für diejenigen, die einen längeren Griff bevorzugen oder die, die motorische Einschränkungen haben.

Um sowohl enge als auch weite Zahnzwischenräume zu reinigen, ist TePe Angle in sechs farbcodierten Größen erhältlich, entsprechend der TePe Interdentalbürsten Original. Alle Größen haben einen kunststoffummantelten Draht zur schonenden Reinigung.




### Produkteigenschaften:


- Abgewinkelter Bürstenkopf für eine optimale Erreichbarkeit
- Langer, flacher Griff
- Kunststoffummantelter Draht
- Sechs farbcodierte Größen

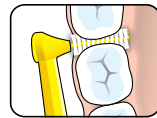


Reinigung der Molaren, bukkal.

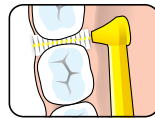


Reinigung der Molaren, lingual.

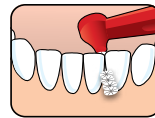

Linguale Reinigung der Vorderzähne.

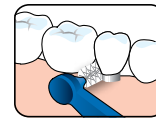

Implantatreinigung bukkal.

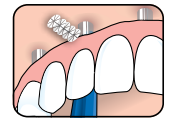

Implantatreinigung palatinal.





Für weitere Informationen  
QR-Code scannen



# Zubehör für Interdentalbürsten



## 1 Praxisbox

Ideal für die Aufbewahrung der TePe Interdentalbürsten in der Zahnarztpraxis. Hilfreich, um die richtige Größe für den Patienten zu finden und ihm Hilfestellung zum richtigen Gebrauch zu geben. Die Box kann mit den Bürsten aus dem Multipack gefüllt werden.

Eine nützliche Übersicht über Größen ist in jeder Box enthalten. Die Praxisbox für Interdentalbürsten Original und X-soft hat acht herausnehmbare Behälter, die TePe Angle Praxisbox umfasst vier Behälter. In jeden Behälter passen 15 Bürsten.

## 2 Multipack

TePe Interdentalbürsten sind in sortenreinen Packungen mit 25 Stück mit einzelnen Schutzkappen erhältlich (grau und schwarz werden ohne Schutzkappe geliefert – bitte separat bei der Bestellung angeben).

## 3 Taschenetui

In diesem praktischen Taschenetui können sechs Bürsten inklusive Schutzkappen und Mini Flosser aufbewahrt werden. Auf Wunsch kann das Taschenetui individuell bedruckt werden (weitere Informationen auf Seite 7).

## 4 Micro Badständer

Hygienische Aufbewahrung von Interdentalbürsten im Badezimmer, passend für vier Interdentalbürsten und Mini Flosser.

## 5 Zahnmodell

Das einzigartige Zahnmodell hat mehrere pädagogische Aspekte. Die Zahnzwischenräume sind farblich gekennzeichnet, um die passende Größe von TePe Interdentalbürsten zu zeigen. Es ist auch nützlich, um Reinigungstechniken mit anderen Mundhygieneprodukten zu zeigen.

Das Modell zeigt:

- Engstehende Zähne
- Zahnlücken
- Gedrehte oder lingual gekippte Prämolaren
- Mesial gekippte Molaren
- Furkationsgrad III
- Durchbrechende dritte Molaren



1

2


## TePe Gingival Gel

Dieses Gel kombiniert die Vorteile von Chlorhexidin mit Fluoriden für zweifachen Schutz des Zahnfleisches und der Zähne. Chlorhexidin weist einen Antiplaque- und Antigingivitiseffekt auf, gleichzeitig helfen Fluoride, Karies zu vermeiden und schützen sensible Zahnhälse.

Das TePe Gingival Gel wurde in Zusammenarbeit mit zahnmedizinischen Experten entwickelt, um einen größtmöglichen Effekt mit zugleich geringsten Risiken bieten zu können. Es enthält weder abrasive Stoffe noch Alkohol. Der Minzgeschmack und die Zusammensetzung ermöglichen eine angenehme und einfache Anwendung mit der Interdentalbürste.

### Anwendungsbereiche:


- Gingivitis
- Parodontitis
- Periimplantäre Mukositis
- Periimplantitis

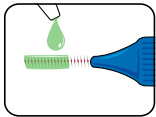

Das Gel direkt auf die Interdentalbürste auftragen...



...oder die Kappe nutzen, um das Gel aufzutragen.

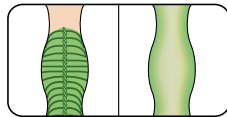

Das Gel bleibt zwischen den Zähnen nachdem die Interdentalbürste entfernt wurde.

Es hat sich gezeigt, dass die lokale Applikation von Chlorhexidin mit Hilfe einer Interdentalbürste einen positiven Effekt auf Zahnfleischentzündungen hat.

#### Lee YC, et al.

The effect of local application of chlorhexidine on plaque and gingivitis.  
*New Zealand Dental Journal* 1996;92:13-15.

Dank seiner Wirksamkeit gilt Chlorhexidin als Goldstandard unter den Antiplaque- und Antigingivitiswirkstoffen.

#### Jones CG

Chlorhexidine: is it still the gold standard?  
*Periodontol* 2000. 1997 Oct;15:55-62.

- 0,2% Chlorhexidin
- 0,32% Natriumfluorid (1.500 ppm)
- Keine abrasiven Stoffe
- Alkoholfrei
- Frischer Minzgeschmack





- 0,32% Natriumfluorid (1.500 ppm)
- Frei von abrasiven Stoffen
- Frischer Minzgeschmack



Für weitere Informationen  
QR-Code scannen




## TePe Interdental Gel mit Fluoriden

TePe Interdental Gel wurde speziell für den effizienten Kariesschutz der Interdentalräume entwickelt. Fluoride stärken den Zahnschmelz, können erste Zeichen von Karies beseitigen und verlangsamen den Demineralisierungsprozess. Des Weiteren kann es die Sensibilität der Zähne mindern. TePe Interdental Gel wird für die allgemeine Anwendung empfohlen, besonders geeignet für Patienten mit erhöhtem Kariesrisiko.

Optimal im Fall von Kariesrisiken, insbesondere bei:

- Kronen und Brücken
- Approximalen Füllungen
- Freiliegenden Zahnhälsen
- Hohem Kariesrisiko

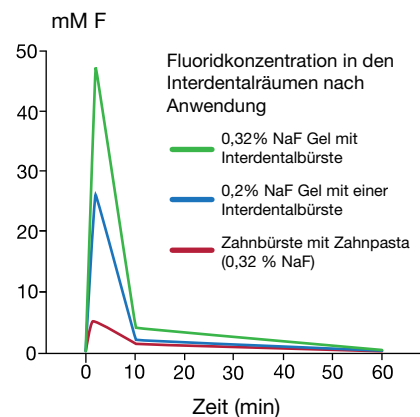

Die Anwendung des Interdental Gels mit Fluoriden in Kombination mit einer Interdentalbürste wurde erfolgreich getestet und bestätigt. Eine Interdentalbürste, die in Fluoridgel eingetaucht wird, ist eine wesentlich effektivere Variante, um Fluoride in die Interdentalräume zu transportieren als andere vergleichbare Methoden.

Das TePe Interdental Gel mit Fluoriden wurde in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Kariologie, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Schweden entwickelt.

### Särner B, et al.

Approximal fluoride concentration using different fluoridated products alone or in combination.

*Caries Res* 2008;42:73–78.

### Särner B, et al.

Fluoride release from NaF- and AmF-impregnated toothpicks and dental flosses in vitro and in vivo.

*Acta Odontol Scand* 2003;61:289–296.






## TePe Mini Flosser™


Der kleine Zahnseidenhalter von TePe ermöglicht ein einfaches, bequemes und schonendes Fädeln. Die dünne, ungewachste Seide gleitet leicht durch enge Kontaktpunkte. Die Oberseite des Flossers ist als Beißfläche geformt. Hierdurch kann die Seide mit Hilfe des gegenüberliegenden Kiefers vorsichtig in den Interdentalraum eingeführt werden, ohne das Zahnfleisch zu verletzen. Die reißfeste und im Halter eingeschweißte Seide lässt sich durch lauwarmes Wasser leicht abspülen und mehrfach verwenden.

- Beißfläche für eine sichere Anwendung
- Klein und handlich
- Auch geeignet für enge Interdentalräume

Einzigartige  
Beißfläche

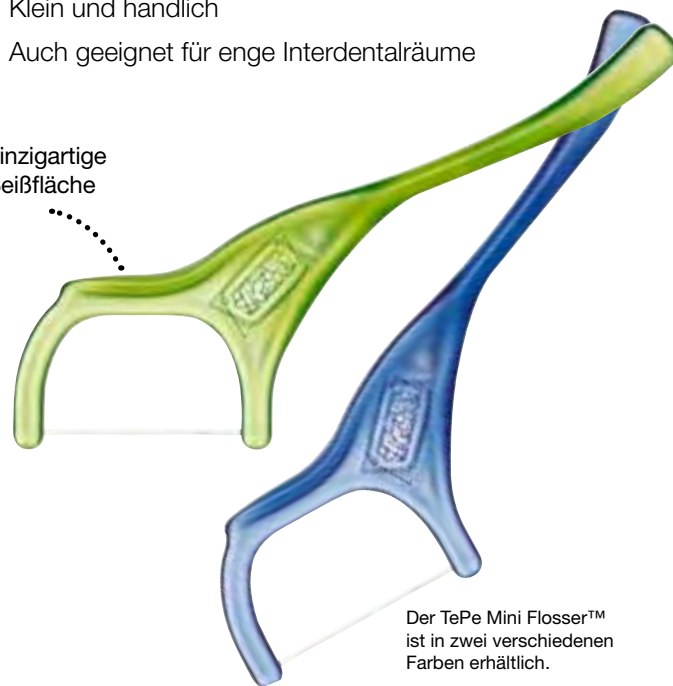

Der TePe Mini Flosser™  
ist in zwei verschiedenen  
Farben erhältlich.

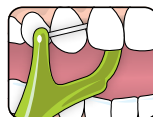

Sichere Anwendung:  
mit dem gegenüber-  
liegenden Kiefer  
leichten Druck auf  
die Beißfläche  
ausüben.



Die reißfeste und  
dünne Seide er-  
möglicht eine leichte  
und effiziente  
Reinigung.

Für weitere Informationen  
QR-Code scannen



## TePe Zahnseide

Die qualitativ hochwertige Zahnseide wurde für die optimale Reinigung der Interdentalräume entwickelt. Sie ist gewachst, flach und breit für die effiziente Entfernung von Zahnbelag. Gewachste Zahnseide gleitet leichter in enge Interdentalräume und minimiert so das Verletzungsrisiko.

- Flache, gewachste Zahnseide
- Effiziente Plaqueentfernung
- Zwei verschiedene Packungsgrößen



## TePe Zahnhölzer

Das TePe Zahnholz ist dreieckig geformt und somit der natürlichen Form des Interdentalraums angepasst.

Plastikzahnstocher sind geeignet für sehr enge Interdentalräume. Sie sind schlank und flexibel für eine leichte Erreichbarkeit, auch zwischen den hinteren Zähnen. Die Oberfläche ist für eine effiziente Reinigung leicht strukturiert.




**Erhältlich in drei Größen:**  
x-slim: Birke. Slim: Birke. Medium: Linde.



Neu

## TePe Multifloss

Multifloss ist ideal zur Reinigung von Multibandapparaturen, Implantaten, Brücken und Zahnzwischenräumen. Mit drei einzigartigen Komponenten – ein fester Plastikfaden zum Einfädeln, ein flauschiger Mittelteil sowie normale Zahnseide – wird Plaque effektiv entfernt und hilft so die Zähne und Zahnfleisch vor Entzündungen zu schützen.

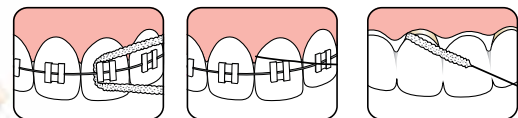

Multibandapparat.

Brücke.

# Spezialprodukte


TePe bietet Patienten mit besonderen Anforderungen an ihre Mundhygiene eine breite Produktpalette. Die enge Zusammenarbeit mit Spezialisten aus den jeweiligen zahnmedizinischen Fachgebieten gewährleistet eine hervorragende Anwendung und hohe Qualität. Alle Produkte sind eingehend getestet und klinisch erprobt.





## TePe Implant Care™ — für beste Implantatpflege

Implant Care hat einen einzigartigen gewinkelten Bürstenkopf und ermöglicht so den einfachen Zugang zu den lingualen und palatinalen Oberflächen von Implantaten. Ein kleiner Bürstenkopf mit langen Borsten erleichtert die Reinigung unter der prothetischen Konstruktion. TePe Implant Care eignet sich auch für retrudierte/retro-klinierte Zähne, Retainer und andere schwer zugängliche Stellen.

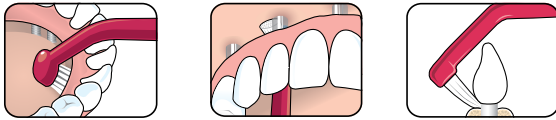


Linguale und palatinale Reinigung von Implantatflächen.



## Implantat/Orthodontiebürste

Ein langer, dünner Hals und ein extra schmaler zweireihiger Bürstenkopf machen diese Bürste ideal für die bukkale Reinigung von Implantaten und rund um feste Zahnspangen.

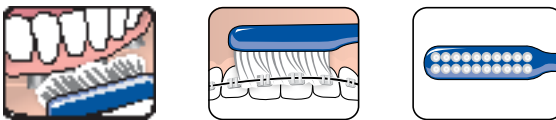


Bukkale Reinigung von Implantatflächen.

Brackets.

Extra schmaler Bürstenkopf.




Neu

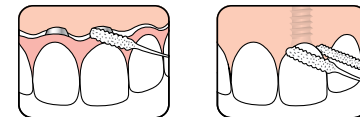

Implantat-gestützte Brücke.

Einzelimplantat.

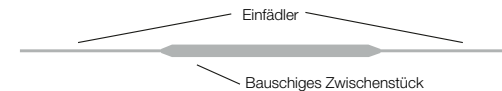

Einfädler

Bauschiges Zwischenstück


## TePe Bridge & Implant Floss

Die Flauschzahnseite wurde speziell für die einfache und effiziente Reinigung von Implantaten, Brücken und Zahnspangen entwickelt. Sie eignet sich auch für die Parodontalpflege. Der feste Plastikfaden ermöglicht das einfache Einfädeln.




### TePe Compact Tuft™


Kleiner, abgewinkelter Bürstenkopf mit einem dichten, abgerundeten Borstenbündel. Ideal zur gründlichen Reinigung von Bereichen, die besondere Aufmerksamkeit benötigen.

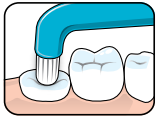


Eruptierende Zähne.

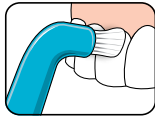


Am Sulcusrand.

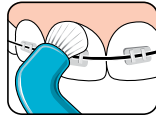


Multibandapparat

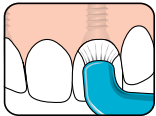

Einzelimplantat.

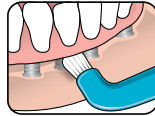

Implantat-gestützte Brücke.

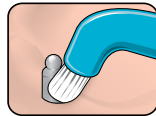


Teleskopprothesen-/Kronenränder.




### TePe Interspace™

Eine abgewinkelte Bürste mit einem schmal zulaufenden Büschel für die Reinigung schwer zugänglicher Flächen. Drei Borstenstärken zur Auswahl und ein abnehmbarer Bürstenkopf.

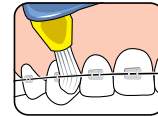


Brackets.

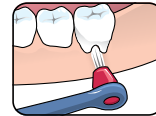


Furkationen.




Distalfäche des letzten Zahnes.

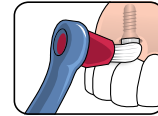

Einzelimplantat.

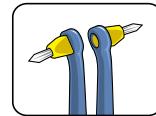

Der Bürstenkopf kann zu beiden Seiten des Halses für unterschiedliche Winkel fixiert werden.

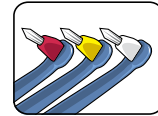

Rot: x-soft  
Gelb: soft  
Weiß: medium.



### TePe Special Care™ — ultraweiche Borsten

TePe Special Care mit 12.000 ultraweichen Borsten wird nach einer oralen Operation und für Patienten mit extrem wunde und empfindlicher Mundschleimhaut empfohlen. Erhältlich in zwei Bürstenkopfgrößen: Select (Rot), Select Compact (Blau).

Anwendungsgebiete:

- Postoperativ und posttraumatisch
- Dünne, geschädigte Mundschleimhaut
- Aphten und Herpes
- Strahlen- und Röntgentherapie
- Extreme Mundtrockenheit



### TePe Gentle Care™ — schonende Reinigung

Die Gentle Care hat außerordentlich weiche Borsten für eine sehr schonende Reinigung. Sie wird als zweiter Schritt nach der Special Care empfohlen, um den Übergang zu einer normalen Zahnbürste zu erleichtern.

Anwendungsgebiete:

- Postoperativ
- Mundtrockenheit
- Nach Bleaching-behandlungen
- Empfindliche Mundschleimhaut
- Freiliegende Zahnhäse
- Die Gentle Care können Sie auch als extra weiche Zahnbürste für die tägliche Zahnpflege verwenden





## TePe Zungenreiniger

Mundgeruch wird in den meisten Fällen durch bakterielle Beläge, die sich auf der Zunge befinden, verursacht. Durch die Verwendung eines Zungenreinigers werden diese Beläge entfernt. Schlechtem Mundgeruch wird vorgebeugt und die Mundgesundheit somit gefördert.


Die Form des TePe Zungenreinigers entspricht der natürlichen Form der Zunge. Dies verringert den Würgereflex und ermöglicht eine einfachere Reinigung im hinteren Mundraumbereich.

- Beugt schlechtem Atem vor
- Entfernt Zungenbelag mit nur einem Zug
- Ist sterilisierbar und spülmaschinenfest



## TePe Extra Grip — einzigartiges Hilfsmittel

Der Griffverstärker erleichtert Patienten mit verringerter manueller Kraft oder mit motorischen Störungen die tägliche Zahnreinigung. Er ermöglicht ein bequemes und stabiles Halten der Zahnbürste und wiegt nur 30 Gramm. Der Extra Grip eignet sich für fast alle TePe Zahnbürsten und Spezialprodukte (ausgenommen TePe Supreme und TePe Nova). Der Extra Grip ist spülmaschinengeeignet.

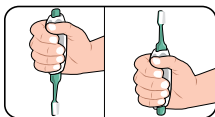


Zum Aufsetzen/Entfernen des Extra Grip einfach den Bürstengriff auf eine stabile Fläche, z.B. einen Tisch klopfen.

*Der TePe Extra Grip wurde in Zusammenarbeit mit Spezialisten des Universitätsklinikums Skåne, Schweden entwickelt.*




## TePe Prothesenbürste — diskret und effektiv

Die Prothesenbürste hat extra lange und kräftige Borsten, die eine bessere Erreichbarkeit und eine effektive Reinigung gewährleisten. Das diskrete Design lässt die Bürste wie eine normale Zahnbürste aussehen.

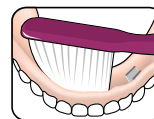

Effiziente Reinigung der Prothese.

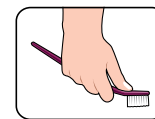

Für eine bessere Handhabung kann der Griff unter heißem Wasser gebogen werden.

# Implantatpflege

Eine gute Implantatpflege ist die Grundvoraussetzung für die Haltbarkeit und den langfristigen Erhalt eines Implantats. Durch professionelle Anleitung und eine vollkommene häusliche Mundhygiene mit den passenden Produkten können periimplantäre Mukositis und Periimplantitis verhindert werden.

## Patientenbroschüren

Die Patientenbroschüre *Spezielle Pflege für Implantate* beinhaltet alles Wissenswerte rund um die häusliche Implantatpflege.



## TePe Implant Kit

Im TePe Implant Kit sind drei Spezialprodukte für die beste Implantatpflege enthalten: Implant Care, Implantat-/Orthodontiebürste und eine Interdentalbürste (blau oder gelb).



Periimplantäre Entzündungen sind unter den Implantatpatienten weit verbreitet. Eine gute und umfassende Mundhygiene ist daher unumgänglich, denn es ist bewiesen, dass eine unzureichende Mundhygiene das Risiko einer periimplantären Entzündung erhöht.


**Heitz-Mayfield LJ**

Peri-implant diseases: diagnosis and risk indicators.  
*J Clin Periodontol 2008;35:292–304.*

**Koldsland OC, et al.**


Prevalence of peri-implantitis related to severity of the disease with different degrees of bone loss.  
*J Periodontol 2010;81:231–238.*

TePe Implant Care™

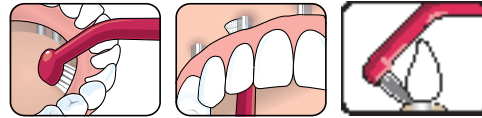


Der abgewinkelte Bürstenhals erleichtert die linguale und palatinale Reinigung.

TePe Implantat-/Orthodontiebürste

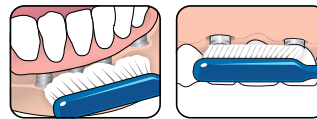

Extra schmaler Bürstenkopf, geeignet für die bukkale Reinigung einer Implantat-gestützten Brücke.

TePe Interdentalbürsten

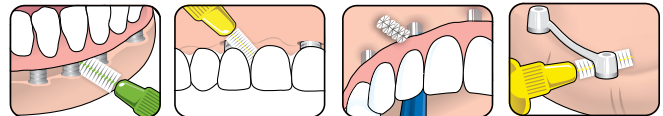


Bukkale Reinigung benachbarter Implantate.

Palatinale Reinigung.

Mühsame Reinigung unter Stegen.

TePe Compact Tuft™

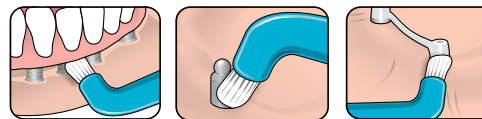

Das kleine Borstenbündel erleichtert die Reinigung von Implantaten. Auch geeignet für die Reinigung um die Vorrichtung für Prothesen.

TePe Bridge & Implant Floss



Flauschzahnhseide zur Reinigung von Brücken und Implantaten.



# Orthodontiepflege

Multibandapparaturen machen die Reinigung komplizierter. Plaque sammelt sich schnell rund um die Brackets, Bänder und Drähte. Um Demineralisierung und die Entstehung von Gingivitis und Karies zu vermeiden, ist eine gründliche Reinigung unerlässlich.



## Patientenbroschüre

Unsere Patientenbroschüre *Die richtige Pflege für Deine Zahnspange* enthält für kieferorthopädische Patienten alles Wissenswerte rund um die häusliche Mundhygiene.

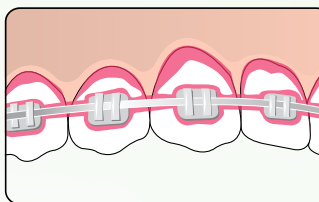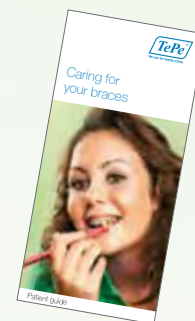

Kritische Flächen:  
am Sulcusrand, um  
die Brackets und unter  
dem Bügel/Draht






Eine feste Zahnsperre erhöht die Anzahl der Oberflächen, an denen sich Plaque anlagern kann. Daher ist es wichtig, die Patienten in gründlicher Mundhygiene zu instruieren und zu motivieren. Nur so kann der Plaquestatus auf ein Minimum reduziert und die Entstehung von Karies und Zahnfleischentzündungen verhindert werden.

**Opsahl Vital S, et al.**  
Caries risk and orthodontic treatment.  
*Int Orthod* 2010;8:28–45.


**Atassi F, et al.**  
Oral hygiene status among orthodontic patients.  
*J Contemp Dent Pract* 2010;11:E025–32.

### TePe Supreme™

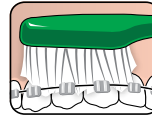


Die Zahnbürste mit zwei verschiedenen hohen Borstenfeldern erleichtert den Zugang rund um Multibandapparaturen.

### TePe Implantat/Orthodontiebürste

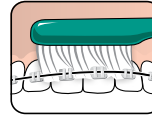


Der extra schmale Bürstenkopf ermöglicht die Reinigung rund um die Multibandapparatur.

### TePe Interspace™

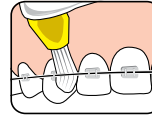


Das schmal zulaufende Borstenbündel ist ideal zum Reinigen rund um die Multibandapparatur.

### TePe Compact Tuft™

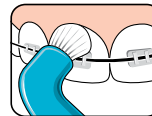


Das abgerundete Borstenbündel ist geeignet für die Reinigung rund um die Multibandapparatur und entlang des Zahnfleisches.


### TePe Interdentälbürsten

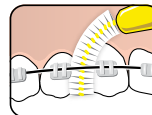

Unter dem Biegel/Draht.

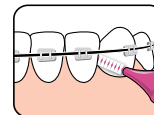

Interdentale Reinigung unter dem Biegel/Draht.

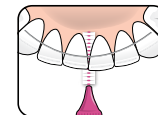

Interdentale Reinigung unter den Retainern.

### TePe Implant Care™



Der abgewinkelte Hals ist ideal für die linguale Reinigung von Zahnsperren.



# Kinderzahnpflege


Die Festlegung guter Mundhygiene-Routinen von Beginn an ist der erste Schritt für gesunde Zähne ein Leben lang. Sobald sich der erste Zahn abzeichnet, ist es Zeit, mit der Zahnpflege zu beginnen.



Patientenbroschüre für Eltern  
*Praktische Tipps und Informationen*  
erhalten Eltern in unserer Patienten-  
broschüre "Kinderzahnpflege".  
Diese verdeutlicht zudem die große  
Bedeutung der kindlichen  
Mundhygiene von Anfang an.



QR-Code scannen, um die Webseite  
über Kinderzähne zu besuchen.

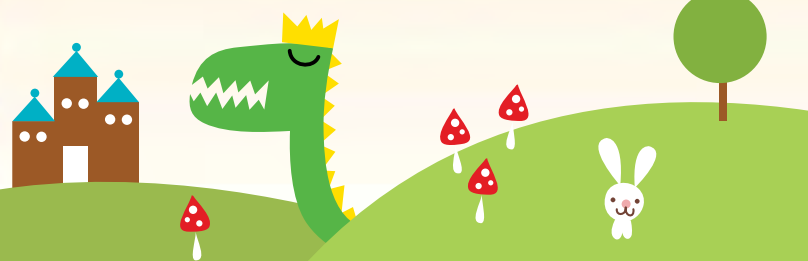



## TePe Mini™

Die TePe Mini eignet sich ab dem ersten Zahn – für Kinder von 0–4 Jahren.

## TePe Select™ Compact


Eignet sich für Kinder ab 4 Jahren. Der Bürstenkopf ist etwas größer als bei der TePe Mini.

## TePe Select™

Durch einen größeren Bürstenkopf ist TePe Select für Jugendliche geeignet.

## TePe Compact Tuft™


Die Einbüschelbürste ist mit ihrem kompakten Bürstenkopf ideal geeignet für die Reinigung der okklusalen Oberflächen, besonders bei eruptierenden Backenzähnen.

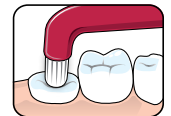

### Wiederentstehung von Plaque (farbig markiert) 48 Std. nach einer professionellen Zahnpflege.



Teilweise eruptierte Molaren

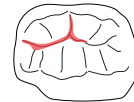

Vollständig eruptierte Molaren mit Kaufunktion

Angepasst durch TePe mit Erlaubnis von Prof. P. Axelsson, DDS, Dr. der Kinderzahnheilkunde

Die Verwendung einer fluoridhaltigen Zahnpasta ist grundlegend für die Vermeidung der Kariesentstehung bei Kindern.

#### Twetman S

Caries prevention with fluoride toothpaste in children: an update. *Eur Arch Paediatr Dent* 2009;10:162–167.

## TePe Mini Flosser™

Bei Kindern ist es sinnvoll, ebenfalls die Interdentalräume zu reinigen. Der stabile und handliche Griff ermöglicht es den Eltern, die Kinder bei der interdentalen Reinigung zu unterstützen.

## TePe Special Care™ Compact

Mit ultraweichen Borsten und einem kleinen Bürstenkopf eignet sich diese Zahnbürste bestens für die tägliche Kinderzahnpflege. Außerdem wird die extraweiche Zahnbürste nach einem Trauma oder chirurgischen Eingriffen empfohlen.

## TePe PlaqSearch™

Das Zweifarben-System unterscheidet neue und alte Plaque. Optimal, um Kinder spielerisch an gründliches Zähneputzen heranzuführen.



# Demonstrationsmaterial

TePe bietet eine breite Palette von Demonstrations- und Informationsmaterial, um die Beratungsqualität bei der Arbeit am Patienten zu verbessern. Die Produktständer sind ideal für die Darstellung und Lagerung der Produkte.



## Mini Display

Entwickelt für sechs Zahnbürsten und/oder Spezialprodukte und neun Interdentalbürsten. Material: Acryl.



## Interdentalsbürsten Display

Geeignet für die Darstellung von maximal 15 Interdentalsbürsten. Material: Acryl.



## Produktkoffer

Enthält den größten Teil der TePe Produkte und ist ein hervorragendes Werkzeug, um die besten Produkte für die individuellen Bedürfnisse jedes Patienten auszuwählen.




## Praktische TePe Kits

Boxen und Ziptüten, die mit Produkten und Informationen für Ihre Patienten gefüllt werden können. Perfekt als Geschenk nach der Behandlung für die Mundpflege zu Hause.



## Zahnmodell


Das einzigartige Zahnmodell hat einige pädagogische Aspekte. Die Zahnzwischenräume sind farblich gekennzeichnet, um die Größe der passenden TePe Interdentalsbürsten zu zeigen.

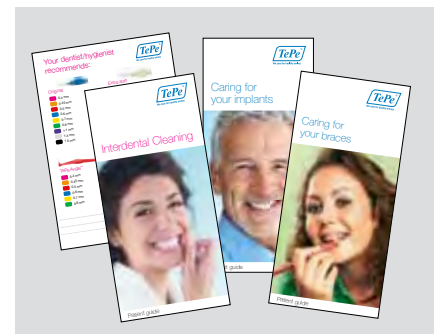

## Informationsmaterial


TePe bietet eine Auswahl von lehrreichem Material für Patienten als auch für zahnmedizinisches Fachpersonal.



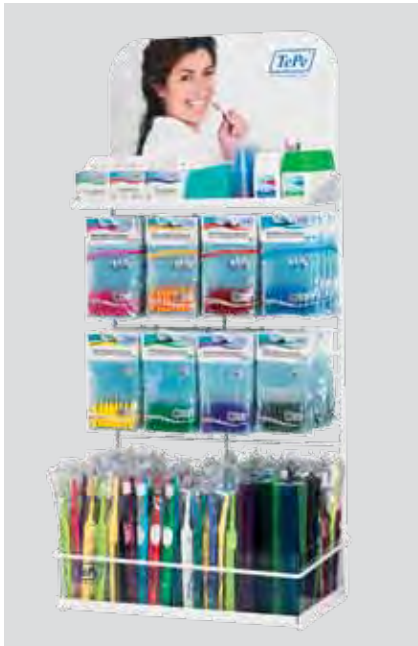

### Sortiments-Display, groß

Mit 8 Haken und 8 Kunststoffbehältern.  
Auch zur Wandmontage geeignet.  
Höhe: 85 cm. Breite: 38 cm. Tiefe: 22 cm.

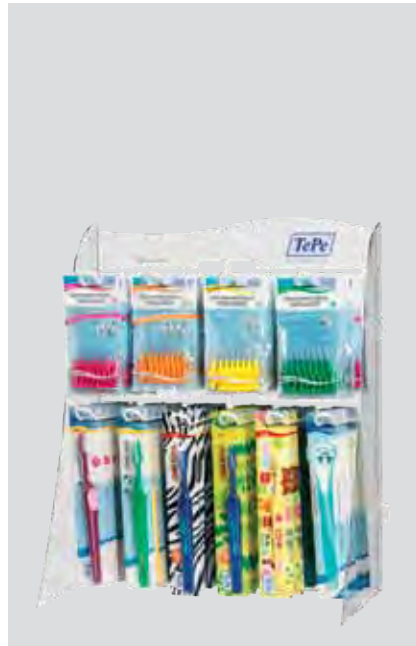

### Sortiments-Display, medium

Mit 10 Haken. Material: klares Acryl.  
Höhe: 48 cm. Breite: 42 cm. Tiefe: 22 cm.



### Tisch-Display, medium

Mit 8 Haken. Material: Pappkarton.  
Höhe: 51 cm. Breite: 37 cm. Tiefe: 16 cm.



### Prophylaxe-Flipchart

Ein Flipchart speziell entworfen für die visuelle Unterstützung während Ihrer Prophylaxebehandlungen.



### Sortiments-Display, klein

Mit 4 haken. Material: klares Acryl.  
Höhe: 20 cm. Breite: 40 cm. Tiefe: 18 cm.



### Tisch-Display, klein

Kann mit 40 Blistern der Interdentalbürsten befüllt werden.  
Höhe: 26 cm. Breite: 34,5 cm. Tiefe: 16 cm.



# Pharmazentralnummern

Zur Kaufempfehlung in die Apotheke

Art.Nr.	Artikel	PZN	PHZ
<b>Zahnbürsten</b>			
352605	Supreme x-soft	01 97 23 72	311 86 53
352606	Supreme Pink x-soft	05 49 54 37	340 36 03
312630	Nova medium	02 28 93 29	311 85 29
312620	Nova soft	02 28 93 35	311 85 35
312610	Nova x-soft	03 72 70 27	311 85 41
322630	Select medium	02 28 91 57	201 30 99
322620	Select soft	02 28 92 75	201 30 82
322610	Select x-soft	08 86 36 63	201 30 76
332630	Select Compact medium	02 28 92 81	311 85 06
332620	Select Compact soft	02 28 92 98	201 30 47
332610	Select Compact x-soft	02 28 93 12	201 30 53
329623	·Graphic· Select soft	00 36 88 81	333 51 55
329626	·Graphic Black· Select soft	00 00 28 49	333 51 78
339610	·Zoo· Select Compact x-soft	07 36 96 59	311 85 70
382610	Mini x-soft	06 49 76 39	344 30 86
345130	Classic medium	08 86 36 28	311 85 12
342120	Classic soft	08 86 36 34	095 67 21
342110	Classic x-soft	08 86 36 40	095 67 15
<b>Spezialprodukte</b>			
452350	Special Care (roter Griff)	08 86 37 17	303 51 63
452151	Special Care Compact (blauer Griff)	00 27 96 11	303 51 86
462350	Gentle Care	04 44 35 27	311 83 63
422300	Prothesenbürste	08 86 37 00	095 65 14
442300	Implantat/Orthodontiebürste	00 27 96 57	311 83 92
472330	Implant Care	05 14 10 01	333 51 61
472440	Implant Kit	07 64 32 67	369 82 19
432300	Compact Tuft	02 74 52 24	297 33 04
942300	Zungenreiniger	02 74 27 05	298 61 23
<b>Winkelbürsten Interspace</b>			
411330	Halter + 12 Bürstenspitzen medium	09 44 23 95	389 58 07
411300	Halter + 12 Bürstenspitzen soft	09 44 24 03	389 58 13
411310	Halter + 12 Bürstenspitzen x-soft	09 44 24 26	389 58 36
<b>Plastikzahnstocher</b>			
522300	75 Stück + 1 Taschenetui	02 45 42 02	311 84 17
522400	5 Stück + 1 Taschenetui	02 41 94 47	311 84 00
<b>Zahnhölzer</b>			
512111	x-slim mit Fluorid, 160 St.	08 86 39 76	311 86 24
512121	slim mit Fluorid, 125 St.	08 86 39 53	311 85 87
512120	slim, 125 St.	08 86 39 30	095 65 43
512131	medium mit Fluorid, 125 St.	08 86 39 47	311 86 01
512130	medium, 125 St.	08 86 39 24	095 65 66
512411	x-slim mit Fluorid, 40 St.	02 28 93 41	311 86 30
512421	slim mit Fluorid, 25 St.	02 28 93 64	311 85 93
512431	medium mit Fluorid, 25 St.	02 28 94 18	311 86 18

Art.Nr.	Artikel	PZN	PHZ
<b>Interdentalbürsten Original (6 Bürsten/Blister)</b>			
135610	PINK 0,4 mm	07 64 11 85	369 85 09
135620	ORANGE 0,45 mm	07 64 11 91	369 84 90
135630	ROT 0,5 mm	07 64 13 05	369 84 49
135640	BLAU 0,6 mm	07 64 13 11	369 82 25
115650	GELB 0,7 mm	07 64 13 28	369 83 66
115660	GRÜN 0,8 mm	07 64 13 86	369 84 61
115670	LILA 1,1 mm	07 64 13 92	369 84 84
114680	GRAU 1,3 mm	07 64 14 23	369 84 55
114690	SCHWARZ 1,5 mm	07 64 14 46	369 84 78
132699	Gemischt	07 78 45 94	381 47 89
962060	Schutzhülle für Interdentalbürsten	02 45 93 00	298 61 46
<b>Interdentalbürsten X-soft (6 Bürsten/Blister)</b>			
122625	HELLORANGE 0,45 mm	09 72 47 68	399 57 56
122635	HELLROT 0,5 mm	09 72 48 05	399 57 62
122645	HELLBLAU 0,6 mm	09 72 48 34	399 57 79
122655	HELLGELB 0,7 mm	09 72 48 40	399 57 85
122665	HELLGRÜN 0,8 mm	09 72 48 63	399 57 91
122675	HELLLILA 1,1 mm	09 72 48 92	399 58 16
122699	Gemischt	09 72 49 23	399 58 39
<b>TePe Angle™ (6 Bürsten/Blister)</b>			
154 610	PINK 0,4 mm	07 70 86 82	379 32 60
154 620	ORANGE 0,45 mm	07 70 87 13	379 32 77
154 630	ROT 0,5 mm	07 70 88 48	379 32 83
154 640	BLAU 0,6 mm	07 70 88 60	379 33 08
154 650	GELB 0,7 mm	07 70 88 77	379 33 14
154 660	GRÜN 0,8 mm	07 70 90 32	379 33 20
154 699	Gemischt	07 70 90 49	379 33 37
<b>Interdental Gel</b>			
972373	Interdental Gel mit Fluoriden, 20 ml	05 13 34 67	333 51 49
982370	Gingival Gel, 20 ml	09 43 20 95	389 45 12
<b>Zahnseide</b>			
642325	Dental Floss (30 Meter) gewachst	07 78 44 82	381 73 51
642099	Dental Floss (5 Meter) gewachst	07 78 44 99	381 73 68
621100	Mini Flosser, 36 St.	09 44 05 68	389 53 68
672250	Bridge & Implant Floss	04 80 93 42	409 80 65
682251	Multifloss	04 80 91 41	409 80 59
<b>Zubehör</b>			
921021	Zahnbürstenhülle / Reisekocher	08 86 39 18	201 25 04
922024	Zahnbürsten-Schutzkappe	02 39 71 83	311 83 34
912210	Extra Grip (Griffverstärker)	02 41 95 07	311 83 57
931030	Micro Badständer für IDB	04 53 85 06	311 83 28
922028	Taschenetui für IDB	01 09 51 61	324 33 29
<b>PlaqSearch</b>			
992078	PlaqSearch, 30 ml	04 80 80 12	409 80 42
992676	PlaqSearch, 10 Tabl.	04 80 75 44	409 80 13



We care for healthy smiles

## We care for healthy smiles

TePe ist ein schwedisches Unternehmen, das seit 1965 qualitativ hochwertige Mundhygieneprodukte produziert und vermarktet. Stetige Zusammenarbeit mit zahnmedizinischem Spezialisten hat TePe zu einer führenden Marke im Bereich der Zahnprophylaxe gemacht. Design, Entwicklung und Produktion erfolgen in unserem Werk in Malmö, Schweden.

TePe hat ca. 200 Mitarbeiter, einen Umsatz von SEK 400 Millionen und Tochterunternehmen in Deutschland, Italien, den Niederlanden, Spanien und Großbritannien. Die breite Palette von TePe Interdentalbürsten, Zahnbürsten und Zahnhölzern werden von zahnmedizinischen Spezialisten empfohlen und von Verbrauchern in mehr als 50 Ländern weltweit verwendet.

### TePe Mundhygieneprodukte Vertriebs-GmbH

Flughafenstraße 52  
22335 Hamburg  
Deutschland

Tel +49 (0)40 570 123-0  
Fax +49 (0)40 570 123-190  
kontakt@tepe.com  
www.tepe.com

### TePe Munhygienprodukter AB

Bronsåldersgatan 5  
213 76 Malmö  
Sweden

Tel +46 (0)40-670 11 00  
Fax +46 (0)40-670 11 11  
info@tepe.com  
www.tepe.com



Intertek

TePe ist zertifiziert nach dem internationalen  
Qualitätsstandard ISO 9001:2008 und Um-  
weltstandard ISO 14001:2004.