

Gebrauchsanweisung

Lesen Sie die Anweisungen vor der Anwendung sorgfältig durch. Heben Sie diese Gebrauchsanweisung auf; vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.

EndWarts[®] Extra gegen Stielwarzen

VORSICHTSMAßNAHMEN!

- Kleben Sie, zum Schutz der die Stielwarze umgebenden gesunden Haut, immer ein Schutzpflaster auf.
- Um Ihre Stielwarze eindeutig zu identifizieren, vergleichen Sie die Beschreibung und die Abbildungen unten im Abschnitt „Was ist eine Stielwarze?“.



ZUR WIRKSAMEN ENTFERNUNG VON STIELWARZEN

1. EINLEITUNG

EndWarts EXTRA gegen Stielwarzen ist ein effektives Mittel zur Selbstbehandlung von Stielwarzen an Hals, Brust, Achsel und Achselhöhle. Es ist das erste Mittel zur Selbstbehandlung von Stielwarzen mit Distickstoffmonoxid, einem Gas, das nach der Aktivierung des Geräts sehr kalt ist. Durch seine Ultra Freeze Technology wird eine Temperatur von etwa -80 °C erreicht und die Stielwarze wirksam vereist.

EndWarts EXTRA gegen Stielwarzen ist ein innovatives Produkt, das schnell und einfach anzuwenden ist. Mit seiner Präzisionsspitze und dem schützenden Schaumstoffpflaster ist die Vereisung mit EndWarts EXTRA gegen Stielwarzen einfach. Die umliegende Haut bleibt unbeeinträchtigt.


Die Behandlung ist für Erwachsene über 18 Jahre geeignet.

2. Was ist eine Stielwarze?

Eine Stielwarze, auch Fibrom genannt, ist eine kleine, weiche, hautfarbene, gutartige Hautwucherung, die häufig über ein dünnes Hautgewebe mit der darunter liegenden Haut verbunden ist. Stielwarzen sind harmlos und nicht ansteckend und können durch Vereisung entfernt werden, wenn sie als störend empfunden werden. Hautwucherungen mit den folgenden Eigenschaften können mit dem EndWarts EXTRA gegen Stielwarzen behandelt werden:

- Kleine, weiche Hautstücke, die über einen schmalen Stiel mit der umgebenden Haut verbunden sind
- Größe 2–5 mm
- Nur an Hals, Brust, Achsel/Achselhöhle
- Hautfarben
- Schmerzfrei bei Berührungen und leicht beweglich


Wenn Ihre Hautwucherung nicht alle oben genannten Eigenschaften aufweist oder wenn Sie Zweifel haben, WENDEN SIE dieses Produkt NICHT AN. Fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie EndWarts EXTRA gegen Stielwarzen anwenden. Die Abbildungen dienen als Orientierung und ersetzen keine Diagnose.

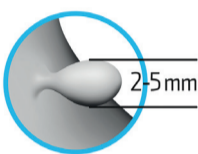

Dies sind Stielwarzen:



Dies ist keine Stielwarze. Behandeln Sie dies nicht:

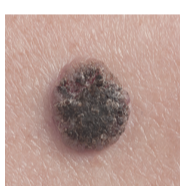

3. WAS SOLLTEN SIE VOR UND NACH DER BEHANDLUNG BEACHTEN?


EndWarts EXTRA gegen Stielwarzen darf nicht angewendet werden:

- Falls in der Packung keine Schaumstoffpflaster enthalten sind, verwenden Sie das Produkt nicht und bringen es in Ihre Apotheke zurück. Sie können das Produkt nur mit diesen Schutzpflastern verwenden.
- Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren;
- Auf Stielwarzen, die größer als 5 mm sind;
- Auf Stielwarzen, die bluten;
- In Kombination mit anderen Behandlungen für Stielwarzen;
- Wenn Sie nicht sicher sind, ob die Hautwucherung eine Stielwarze ist. Versuchen Sie nicht, Muttermale, Leberflecken, pigmentierte Läsionen, behaarte, harte, kürzlich blutende und unregelmäßige Wucherungen oder alles andere, was möglicherweise Hautkrebs (Melanom) sein könnte, zu entfernen;
- Wenn Sie an Hautkrebs erkrankt sind oder jemals waren oder wenn bei Ihnen präkanzeröse Hautläsionen (eine Hautveränderung, die möglicherweise eine Vorstufe einer Krebserkrankung sein kann) diagnostiziert wurden;


7. WIE IST ENDWARTS EXTRA GEGEN STIELWARZEN ANZUWENDEN?

! BITTE LESEN SIE DIE NACHFOLGENDEN SCHRITTE DURCH, BEVOR SIE MIT DER BEHANDLUNG BEGINNEN.

AKTIVIEREN

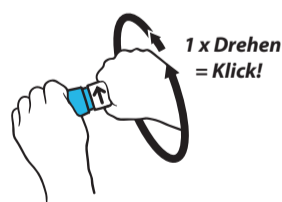

1 x Drehen
= Klick!

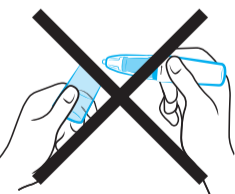

Nur vor der ersten Anwendung EndWarts EXTRA gegen Stielwarzen muss nur einmalig aktiviert werden. Nehmen Sie die Kappe noch nicht ab. Führen Sie mit dem weißen Teil des Geräts mindestens eine vollständige Umdrehung in Pfeilrichtung aus, bis Sie einen lauten Klick hören. Dafür müssen Sie eine gewisse Kraft aufwenden. Nach erfolgreicher Aktivierung des Geräts darf dieser Schritt nicht nochmals wiederholt werden.


1 VORBEREITEN

Schützen Sie die umgebende Haut.



Entfernen Sie das Mittelstück des Schutzpflasters und die dünne Plastikfolie auf der Rückseite des Schutzpflasters. Das selbstklebende Schutzpflaster ist aus Schaumstoff. Kleben Sie es so auf die Haut, dass es die Stielwarze umschließt. Es sitzt passgenau und hilft Ihnen, die Stielwarze ganz gezielt zu behandeln.

2 LADEN

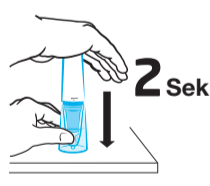

2 Sek

Stellen Sie EndWarts EXTRA gegen Stielwarzen aufrecht, mit der transparenten Kappe nach unten, auf eine flache und stabile Oberfläche. Halten Sie das Gerät mit einer Hand gut fest, während Sie mit der anderen Hand den weißen Teil des Geräts genau zwei Sekunden nach unten drücken. Ein zischendes Geräusch wird zu hören sein. Längeres Drücken vermindert die Anzahl der möglichen Anwendungen, zu kurzes Drücken vermindert den Vereisungseffekt.

3 PRÜFEN



Nehmen Sie die Kappe ab. Sie sollten Eisdampf sehen. Falls kein Eisdampf austritt, wiederholen Sie Schritt 2.

4 ANWENDEN




20 Sek

Drücken Sie die Spitze sofort fest oben auf die Stielwarze in der Mitte des Pflasters. Für das beste Ergebnis und zur Sicherheit halten Sie bitte die Zeit genau ein! Behandeln Sie die Stielwarze für genau 20 Sekunden. Entfernen Sie das Schutzpflaster.

Wenden Sie es nicht länger als 20 Sekunden an. Verwenden Sie immer ein Schutzpflaster. Eine falsche oder zu lange Anwendung kann die Haut oder die Nerven schädigen. Nach dem Gebrauch Einweg-Spitze wechseln, Kappe wieder aufsetzen und im Kühlschrank lagern. FERTIG! EndWarts EXTRA gegen Stielwarzen ist nun für die nächste Anwendung bereit.

Innerhalb von 14 Tagen wird die Stielwarze langsam verschwinden. Falls die Stielwarze oder Teile von ihr noch nicht verschwunden sind, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4.

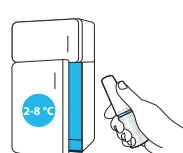

Oystershell NV
Nijverheidsweg 10
9820 Merelbeke
BELGIEN

Vertrieb in Deutschland:
MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Benzstr. 1,
61352 Bad Homburg, Deutschland
Vertrieb in Österreich:
MEDA Pharma GmbH, Guglgasse 15, 1110
Wien, Österreich

www.endwarts.de/www.endwarts.at

CE 0459 14,3g e

1673/620013/19E/07020595/0

Diese Gebrauchsanweisung wurde zuletzt überarbeitet im Mai 2019.