


Polierstreifen zur Zahnzwischenraumreinigung

PZN 03150131 | Art. 1159

Polierstreifen zur Zahnzwischenraumreinigung sind speziell entwickelt, um weiche Beläge und Verfärbungen effektiv zu entfernen. Einfach in den Zahnzwischenraum einführen, hin- und herbewegen und für eine gründliche Reinigung wieder entfernen.

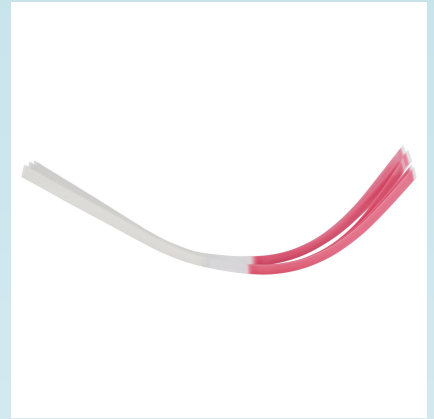

Unsere Zahnpolierstreifen sind ein effektives Werkzeug zur Reinigung und Glättung der interproximalen Zahnbereiche, insbesondere der Zahnzwischenräume. Die regelmäßige Anwendung dieser Streifen trägt zur Entfernung von weichen Belägen und Verfärbungen bei, wodurch die Mundhygiene verbessert und das Risiko von Karies und Zahnfleischproblemen reduziert wird.

Die Anwendung der Polierstreifen ist einfach: Nehmen Sie ein Ende in jede Hand. Den Streifen mit der unbeschichteten Fläche (transparente Stelle in der Mitte) wie Zahnseide in den Zahnzwischenraum einführen. Durch das Hin- und Herbewegen der beschichteten Flächen den Zahnzwischenraum reinigen. Im Anschluss an der unbeschichteten Fläche aus dem Zahnzwischenraum entfernen.

Eine regelmäßige, jedoch nicht tägliche Anwendung wird empfohlen, idealerweise alle 4-6 Wochen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Beachten Sie jedoch, dass die Polierstreifen nur für eine Behandlung geeignet sind.

Merkmale, Marke, Eigenschaften und Inhaltsstoffe

Weiß

Produktinformationen

Abmessungen: 1,70 x 8,00 x 8,80 cm

Artikelgewicht: 0,004 kg

Gewicht mit Verpackung 0,01 kg

Inhalt/Menge: 5 St

UVP: 6,99 € inkl. MwSt

Megadent

Megadent-Deflogrip Gerhard Reeg GmbH

Am Wehrhahn 39
40211 Düsseldorf
www.megadent.de

info@megadent.de
Tel +49 211 17754 0
Fax +49 211 17754 20



4 1018994 011595