


**Der Smartick® ist ein Geräteset und kann an Ihrem Schüsselbund oder Rucksack befestigt werden.**

**Neue Version: 1 kleiner und 1 großer Zeckenhaken, um Zecken bei Ihnen und Ihrem Tier, wie Hund, Katze oder Pferd schnell, sicher und schmerzlos zu entfernen, ohne die Zecke zu quetschen.**

**In 2 Farben erhältlich !**

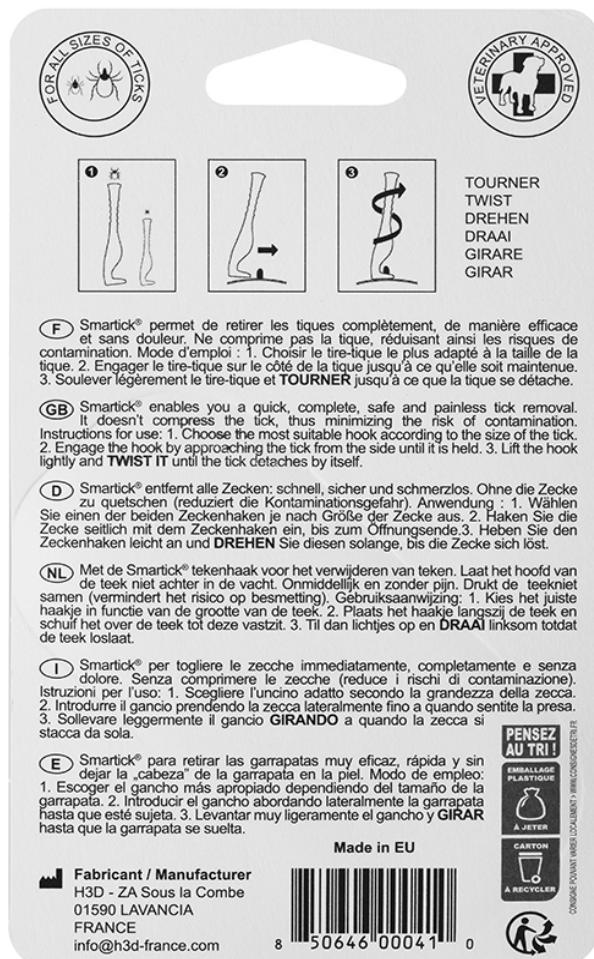

**F** Smartick® permet de retirer les tiques complètement, de manière efficace et sans douleur. Ne comprime pas la tique, réduisant ainsi les risques de contamination. Mode d'emploi : 1. Choisir le tire-tique le plus adapté à la taille de la tique. 2. Engager le tire-tique sur le côté de la tique jusqu'à ce qu'elle soit maintenue. 3. Soulever légèrement le tire-tique et **TOURNER** jusqu'à ce que la tique se détache.

**GB** Smartick® enables you a quick, complete, safe and painless tick removal. It doesn't compress the tick, thus minimizing the risk of contamination. Instructions for use: 1. Choose the most suitable hook according to the size of the tick. 2. Engage the hook by approaching the tick from the side until it is held. 3. Lift the hook lightly and **TWIST IT** until the tick detaches by itself.

**D** Smartick® entfernt alle Zecken: schnell, sicher und schmerzlos. Ohne die Zecke zu quetschen (verhindert die Kontaminationsgefahr). Anwendung : 1. Wählen Sie einen der beiden Zeckenhaken je nach Größe der Zecke aus. 2. Haken Sie die Zecke seitlich mit dem Zeckenhaken ein, bis zum Öffnungsende. 3. Heben Sie den Zeckenhaken leicht an und **DREHEN** Sie diesen solange, bis die Zecke sich löst.

**NL** Met de Smartick® tekenhaak voor het verwijderen van teken. Laat het hoofd van de teek niet achter in de vacht. Onmiddellijk en zonder pijn. Druk de teek niet samen (vermindert het risico op besmetting). Gebruiksaanwijzing: 1. Kies het juiste haakje in functie van de grootte van de teek. 2. Plaats het haakje langs de teek en schuif het over de teek tot deze vastzit. 3. Til dan lichtjes op en **DRAAI** linksom totdat de teek loslaat.

**I** Smartick® per togliere le zecche immediatamente, completamente e senza dolore. Senza comprimere le zecche (reduce i rischi di contaminazione). Istruzioni per l'uso: 1. Scegliere l'uncino adatto secondo la grandezza della zecca. 2. Introdurre il gancio prendendo la zecca lateralmente fino a quando sentite la presa. 3. Sollevare leggermente il gancio **GIRANDO** a quando la zecca si stacca.

**E** Smartick® para retirar las garrapatas muy eficaz, rápida y sin dejar la "cabeza" de la garrapata en la piel. Modo de empleo: 1. Escoger el gancho más apropiado dependiendo del tamaño de la garrapata. 2. Introducir el gancho abordando lateralmente la garrapata hasta que este sujetada. 3. Levantar muy ligeramente el gancho y **GIRAR** hasta que la garrapata se suelta.

Made in EU

**Fabricant / Manufacturer**  
H3D - ZA Sous la Combe  
01590 LAVANCIA  
FRANCE  
info@h3d-france.com



PENSEZ  
AU TRI!  
EMBALLAGE  
PLASTIQUE  
À JETER  
CARTON  
À RECYCLER  
CONSEIL POINT MUNICIPAL POUR LE COMBUSTION

Smartick® es una herramienta médica que permite extraer las garrapatas de forma segura y eficiente. 1. Seleccionar el gancho adecuado según el tamaño de la garrapata. 2. Introducir el gancho lateralmente en la base de la garrapata. 3. Girar el gancho para extraer la garrapata. 4. Limpiar la piel con un paño húmedo.

Smartick® es una herramienta médica que permite extraer las garrapatas de forma segura y eficiente. 1. Seleccionar el gancho adecuado según el tamaño de la garrapata. 2. Introducir el gancho lateralmente en la base de la garrapata. 3. Girar el gancho para extraer la garrapata. 4. Limpiar la piel con un paño húmedo.