

Zehenseparator aus Silikon

Toe Separator
Séparateur d'orteils / Teenscheider
Separatore dita

Art.-Nr. / Art. no. 107 020 large

2 Stück / pieces / pièces / stuks / pezzi

PEDI SOFT®
Silikon & Gel

bort
MEDICAL

bort
MEDICAL

Sanfter Fußschutz aus Silikon & Gel



Art.-Nr. 107 010



Art.-Nr. 107 030



Art.-Nr. 107 060



Art.-Nr. 107 070



Art.-Nr. 107 080




Art.-Nr. 107 100



Art.-Nr. 107 140




Art.-Nr. 107 120

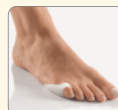

Art.-Nr. 107 130

Funktion:

PEDISOFT® Zehenseparator aus Silikon trennt verlagerte und eng anliegende Zehen und dient so als Korrekturhilfe. Er schützt vor Wundreiben, Hautreizungen und Hühneraugen zwischen den Zehen. Er ist physiologisch unbedenklich und verursacht keine Pilzgefahr in den Zehenzwischenräumen.

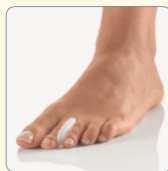

Zehenseparator
Art.-Nr. 107 020

Vorteile durch Silikon:

- dauerhaft und strapazierfähig
- sehr weich und glatt
- hautfreundlich und hygienisch
- dank Memory-Effekt optimale Anpassung, nach dem Tragen sofortige Rückkehr in die ursprüngliche Form

Anwendung:

Auf gereinigter, trockener Haut anwenden. Direkt zwischen die Zehen legen. Das weiche Material passt sich der Kontur der Zehen optimal an und haftet sicher, ohne zu verrutschen.

Pflegehinweis:

Zur Reinigung mit Seife waschen, gut trocknen lassen und einpulvern.

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

Distribution:

- (CH) Orthosan SA | 3172 Niederwangen | Tel. 0848800333
- (F) Neut | 75002 Paris | Tél. 0142338346
- (B) M2M Europe NV | 9900 Eeklo | Tel. 093784800
- (I) Meddy Italia s.r.l. | 22032 Albese con Cassano
Tel. 0314291111

BORT GmbH | Postfach 1330 | D-71367 Weinstadt | www.bort.com

Art.-Nr. 107 020 large



MA003-107025-NL-04/14



4 00582962029189
(B) CNK 1636-794
(CH) PhC 2317652
(AT) PZN 3624540
(D) PZN 01512877

LOT:

III IIII IVI Im IIIm IIIIm IVIm In



Zehenseparator aus Silikon

Toe Separator

Séparateur d'orteils / Teenscheider

Separatore dita

Art. no. 107 020 large

(GB) Toe Separator

Function

PEDISOFT® Toe Separator, made of silicone, separates dislocated and closely positioned toes, such serving also as correcting device. It protects against sore rubbing, skin irritation and corn in between toes. It is physiological safe and does not cause the risk of athlete's foot in between toes.

Care instructions

For cleaning wash with soap, dry well and powder.

Application

Apply onto clean, dry skin. Put directly between toes. The soft material adjusts itself optimally to the contour of toes and stays safely without slipping or rubbing or causing runners at socks and stockings.

(F) Séparateur d'orteils

Fonction

L'écarteur d'orteils sépare les doigts de pied déformés, chevauchant et prévient les irritations et les cors.

Conseils pour l'entretien

Après usage il doit être lavé avec du savon. Bien laisser sécher et enduire de talc.

Utilisation

Sur peau sèche et propre. Placer directement entre les doigts de pied. Le matériel doux s'adapte parfaitement aux contours des orteils sans glisser.

(I) Separatore dita

Funzione

Il separatore delle dita in silicone separa dita malformate e molto ravvicinate, correggendole. Protegge da lesioni di sfregamento, irritazioni della pelle e occhi di vernice tra le dita. Dal punto di vista fisiologico non presenta problemi e non causa un pericolo di micosi negli interstizi delle dita.

Avviso per la cura

Lavare con sapone, lasciare asciugare bene e spolveratelo con un pó di borotalco.

Applicazione

Usare con la pelle pulita ed asciutta. Applicare direttamente tra le dita. Il materiale morbido si modella in modo ottimale ai contorni delle dita, aderendo con sicurezza senza pericolo chi scivoli via oppure causi delle smagliature a calze e collant.