

Mittelfuß-Ballen-Pad

Midfoot Pad / Pad (Hallux Valgus)
du carpe / Middenvoet verband /
Pad cuscino alluce Valgo-metatarso

**Art.-Nr./Art. no. 137 090 large
ab Schuhgröße 41**

Shoe size over 41 / A partir de pointure 41/
Vanaf schoenmaat 41 / Dal numero 41

1 Paar / pair / paire / paar / paio


PEDI SOFT®
TEXLINE

bort
MEDICAL

bort
MEDICAL



UNSERE PEDI SOFT® TEXLINE-PRODUKTE FÜR GESUNDE FÜSSE

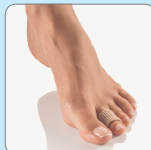

Art.-Nr. 137 010




Art.-Nr. 137 030



Art.-Nr. 137 040



Art.-Nr. 137 050

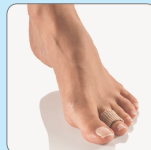

Art.-Nr. 137 060



Art.-Nr. 137 100

Weichpolsterung der Ze- hengrundgelenke im Vorfußbereich.

Funktion:

Zur Schmerzlinderung bei
Druckbeschwerden an Ballen
und Kleinzehne sowie zur
Druckentlastung
im Vorfußbereich.

Anwendung:

Auf gereinigter, trockener
Haut anwenden. Über den
Fuß ziehen, das Durchschlüp-
fen der beiden Zehen verhin-
dert ein Verrutschen des Pads.

Warnhinweise:

Nicht bei offenen Wunden
anwenden. Bei Diabetes,
Entzündungen oder Gefäßer-
krankungen vor Anwendung
den Arzt befragen



Vorfuß-Pad

Art.-Nr. 137 090

Vorteile:

- > dauerhaft, strapazierfähig,
mehrfach verwendbar
- > sehr hygienisch und haut-
freundlich
- > angenehmes Tragegefühl
- > Maschinenwaschbar
bei 30°C
- > Polster verteilt den Druck
optimal und schützt vor
zusätzlichem Druck von
außen
- > Kehrt nach dem Tragen
dank **Memory-Effekt**
sofort in die Ursprungsform
zurück

Mit Textilbezug
für empfindliche
Füße

PEDI SOFT®
TEXLINE

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

Distribution:

- CH Orthosan SA | 3172 Niederwangen | Tel. 0848800333
- F Neut | 75002 Paris | Tél. 0142338346
- B M2M Europe NV | 9900 Eeklo | Tel. 093784800
- I Meddy Italia s.r.l. | 22032 Albese con Cassano
Tel. 0314291111

BORT GmbH | Postfach 11330 | D-71367 Weinstadt | www.bort.com



Made in Germany



MATIS-137090/M/L/04/14

Art.-Nr. 137 090 large



4 005862 063633
D PZN 10207512
AT PZN 4176196
CH PhC 5824527

LOT:

III IIII IVI Im IIIm IIIIm IVm In

PEDI SOFT®
TEXLINE



Mittelfuß-Ballen-Pad

Midfoot Pad / Pad (Hallux Valgus)
du carpe / Middenvoet verband /
Pad cuscino alluce Valgo-metatarso

**Art.-Nr./Art. no. 137 090 large
ab Schuhgröße 41**

Shoe size over 41 / A partir de pointure 41/
Vanaf schoenmaat 41 / Dal numero 41

ⓖB Midfoot Pad

Soft padding of the metacarpophalangeal joints in
the forefoot area.

Function

Pain relief in the case of pressure-related disorders at the ball and little toe and simultaneous pressure relief in the forefoot area.

Application

Apply to cleaned, dry skin. Pull over the foot; slipping of the pad is prevented by the toes being slipped through.

Warning note

Do not apply in case of open wounds. In case of diabetes, inflammations or vascular diseases consult a doctor!

ⓕ Pad (Hallux Valgus) du carpe

Rembourrage mou des articulations basales des
orteils dans la partie antérieure du pied.

Function

Soulage en cas de douleurs dues à la compression de l'«oignon» et du petit orteil et allège la pression exercée sur la partie antérieure du pied.

Emploi

A utiliser sur la peau nettoyée et sèche. Enfiler sur le pied. Le passage entre les deux orteils empêche le glissement du coussinet

Attention

Ne pas utiliser en cas de blessures ouvertes. En cas de diabète, d'inflammations ou de maladies de vaisseaux, demander auparavant l'avis d'un médecin!

ⓑI Pad cuscino alluce Valgo-metatarso

Imbottitura morbida per le articolazioni metatarso-falangee dell'avampiede.

Funzione

Sollievo dal dolore per disturbi da carico sull'eminenza dell'alluce e sul mignolo del piede e per la riduzione di carico nella regione dell'avampiede.

Applicazione

Applicare su pelle asciutta e pulita. Infilare sul piede, lo scivolamento dell'imbottitura viene impedito dall'inserimento delle dita.

Avvertimento

Non applicare su ferite aperte. In caso di infiammazioni, diabete o angiopatie, consultare il medico prima dell'utilizzo!