

Zehen-/Fingerhaube aus Gel

Toe / Finger Cover

Couvre-doigt/couvre-orteil en gel

Teen- en vingerbescherming (kapje) uit gel

Cappuccio proteggi dita in gel per mani e piedi

Art.-Nr./Art. no. 107 640 small

2 Stück/pieces/pièces/stuks/pezzi

PEDI SOFT®
Silikon & Gel

bort
MEDICAL

bort
MEDICAL

Sanfter Fußschutz aus Silikon & Gel




Art.-Nr. 107 010



Art.-Nr. 107 020



Art.-Nr. 107 030

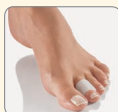

Art.-Nr. 107 060



Art.-Nr. 107 070




Art.-Nr. 107 080

Funktion:

Zur Druckentlastung an Fingern und Zehen. Speziell auch bei Hammerzehen.

Die PediSoft® Zehen-/Fingerhaube kann bequem auf Finger oder Zehen gesteckt werden. Bietet speziell auch bei Hammerzehen einen idealen Schutz vor Druckstellen.

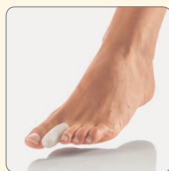

Zehen-/Fingerhaube aus Gel

Art.-Nr. 107 640

Vorteile:

- Die Gelpolster verteilen den Druck optimal
- Langlebig, sehr strapazierfähig und mehrfach verwendbar
- Sehr weich und glatt
- Sehr hygienisch
- Dank Memory-Effekt optimale Anpassung, kehrt nach dem Tragen sofort in die Ursprungsform zurück

Anwendung:

Die PediSoft® Zehen-/Fingerhaube über die betroffene Zehe oder den betroffenen Finger ziehen. Zur Vermeidung von Mazerationen sollte das Produkte für mindestens 3 bis 4 Stunden pro Tag abgenommen werden.

Warnhinweise:

Nicht bei offenen Wunden anwenden. Bei Diabetes, Entzündungen oder Gefäßerkrankungen vor Anwendung den Arzt befragen!

Bei Auftreten von Hautirritationen oder Durchblutungsstörungen das Produkt sofort absetzen und ggf. einen Arzt konsultieren.

Pflegehinweis:

Zur Reinigung mit Seife waschen und gut trocknen lassen. Gegebenenfalls leicht einpulvern.

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

Distribution:

(CH) Orthosan SA | 3172 Niederwangen | Tel. 0848800333

(F) Neut | 75002 Paris | Tél. 0142338346

(B) M2M Europe NV | 9900 Eeklo | Tel. 093784800

(I) Meddy Italia s.r.l. | 22032 Albese con Cassano
Tel. 0314291111

BORT GmbH | Postfach 1330 | D-71367 Weinstadt | www.bort.com

Art.-Nr. 107 640 small



MA4018-107642-ML-05/14



LOT:

III IIII IVI Im IIIm IIIIm IVIm In



Zehen-/Fingerhaube aus Gel

Toe / Finger Cover

Couvre-doigt/couvre-orteil en gel

Teen- en vingerbescherming (kapje) uit gel

Cappuccio protetti dita in gel per mani e piedi

Art.-Nr. / Art. no. 107 640 small

(GB) Toe/Finger Cover

Function

The PediSoft® Toe/Finger Cover fits comfortably on fingers or toes. Offers ideal protection against pressure points especially with hammer toes.

Application

Pull the PediSoft® Toe/Finger Cover over the affected toe or finger. To prevent maceration, the product should be removed for at least 3 to 4 hours per day.

A note on care

Clean with soap and allow to dry thoroughly. Powder lightly, if necessary.

Warnings

Do not apply to open wounds. In cases of diabetes, inflammations or vascular diseases, consult a medical practitioner before use. In case of skin irritation or blood supply problems, stop using the product immediately and consult a medical practitioner, if necessary.

(F) Couvre-doigt/couvre-orteil en gel

Fonction

Le couvre-doigt/couvre-orteil Pedi Soft® se laisse facilement déposer sur le doigt ou l'orteil. Offre tout particulièrement aussi pour les orteils en marteau une protection idéale des points de pression.

Application

Tirer les couvre-doigts/couvre-orteils PediSoft® sur les orteils ou les doigts concernés. Pour éviter des effets de macération, le produit doit être retiré au moins 3 à 4 heures par jour.

Instruction de soin

Pour le nettoyage, laver avec du savon et bien laisser sécher. Le cas échéant, légèrement poudrer.

Avertissement

Ne pas appliquer sur des plaies ouvertes. En cas de diabète, d'inflammation ou de maladies des veines, consulter le médecin avant application! Arrêter immédiatement l'utilisation du produit et le cas échéant consulter un médecin en cas d'irritations de la peau ou d'anomalies de la circulation sanguine.

(I) Cappuccio protetti dita in gel per mani e piedi

Funzione

Il cappuccio protetti dita per mani e piedi PediSoft® può essere facilmente applicato sulle dita delle mani o dei piedi. Ideale per proteggere le dita a martello da possibili abrasioni.

Applicazione

Infilare il cappuccio protetti dita PediSoft® sul dito interessato. Per evitare macerazioni, il prodotto dovrebbe essere tolto per almeno 3-4 ore al giorno.

Consigli per la manutenzione

Lavare con sapone e far asciugare bene. Spolverare eventualmente con un po' di talco.

Avvertimento

Non applicare su ferite aperte. In caso di infiammazioni, diabete o angiopatie, consultare il medico prima dell'utilizzo! Togliere immediatamente il prodotto in presenza di irritazioni cutanee o disturbi di vascolarizzazione, ed eventualmente consultare il medico.