



Bestellinformation

	Produkt	Nadel oder Klinge Stichtiefe/Blutmenge	Bestellnummer
	MEDLANCE® plus Universal Ideal zur Entnahme von Kapillarblut im Profibereich	Nadel 21G 1,8 mm 10 - 30 µl	7044 200 Stk. PZN 13166541 7144 100 Stk. PZN 13197464
	MEDLANCE® plus Lite Ideal für die Blutzuckermessungen im ambulanten Bereich	Nadel 25G 1,5 mm bis zu 10 µl	7043 200 Stk. PZN 1131566 7143 100 Stk. PZN 13197441
	MEDLANCE® plus Super Lite Die „Sanfte“ in der MEDLANCE®-Familie	Nadel 30G 1,2 mm 10 - 30 µl	7054 200 Stk. PZN 11191658 7154 100 Stk. PZN 12452983
	MEDLANCE® plus Extra Ideal bei verhornter Haut und größeren Blutmengen	Nadel 21G 2,4 mm 30 - 70 µl	7045 200 Stk. PZN 1131537 7145 100 Stk. PZN 13197470
	MEDLANCE® plus Special Die ultra-scharfe Klinge für große Blutmengen und die schnelle Wundheilung.	Klinge 0,8 mm 2 mm 70 - 100 µl	7046 200 Stk. PZN 6730030 7146 100 Stk. PZN 13197487

Vertrieb


eu-medical GmbH | Bärensteiner Str. 27-29 | D-01277 Dresden
info@eu-medical.de | www.eu-medical.de
Gebührenfreie Rufnummer 0800-5 88 80 56

 **Hersteller:** HTL-STREFA S.A.
Adamówek 7 | 95-035 Ozorkow Poland



MEDLANCE[®]_{plus}

Sicherheitslanzetten

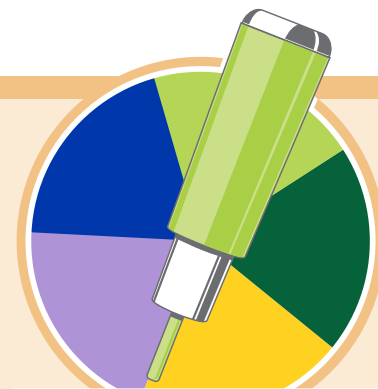

**Sanft und sicher -
Sterile Sicherheitslanzetten**

- Erhältlich in der praktischen Spenderbox
- für Profis und rezeptierbar

Ein sicheres Arbeitsgerät nach TRBA 250

- Doppelte Sicherheit bei der Blutentnahme
- Leicht zu bedienen
- Kaum zu spüren
- Für jede Anwendung der richtige Typ





Doppelte Sicherheit bei der Blutentnahme.
Der Sicherheitsmechanismus verhindert eine versehentliche Auslösung der MEDLANCE® plus Lanzette. Ein weiterer Anstich ist nicht möglich. Sicherheit für den Profibereich.

Leicht zu bedienen.
MEDLANCE® plus ermöglicht die sanfte und sichere Kapillarblutentnahme.


Kaum zu spüren.
Die Nadel ist besonders fein und durch Silikonbeschichtung extraglatt.

Für jede Anwendung der richtige Typ.
MEDLANCE® plus Sicherheitslanzetten sind sowohl für den Einsatz in Kliniken, Pflegeheimen, Ambulanzen und Labors als auch für den Hausgebrauch geeignet. Für verschiedene Anwendungszwecke sind verschiedene Ausführungen erhältlich – einfach farblich zu unterscheiden (siehe Rückseite).



Gebrauchsanweisung

Einfach den Schutzstift abdrehen und herausziehen.

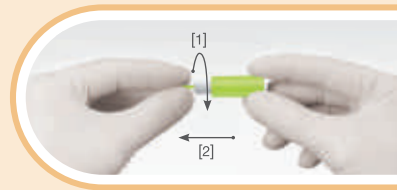

Das Gehäuse sanft auf die entsprechende Einstichstelle drücken. Die optimale Stichtiefe sichert MEDLANCE® plus durch den eingebauten Abstandshalter.



Sanft und mit kurzen Unterbrechungen neben die Einstichstelle drücken, so erhalten Sie problemlos die erwünschte Blutmenge.

