

GenuTrain® P3

Aktivbandage für das Kniegelenk zur Verbesserung der Patellaführung.

Hilfsmittelnummer:

alt 05.04.01.0035 beantragt für 23.04.05.0xxx



Indikationen

- Femoropatellares Schmerzsyndrom (Chondropathie, Chondromalazie)
- Patellalateralisation (Luxationstendenz)
- Nach Lateral-Release-OP
- Patellaspitzensyndrom
- Instabilitätsgefühl
- Vorderer Knieschmerz
- Patellahochstand


Merkmale

- Train® Gestrickkonzept: besonders dehnbar, atmungsaktiv und feuchtigkeitsabführend für exzellenten Tragekomfort, insbesondere im Bereich der Kniekehle.
- Eine spezielle hautfreundliche Gestrickbindung bedeckt den kritischen Kniekehlenbereich.

- Die seitlich gelegte Naht verhindert Druckstellen im Kniekehlenbereich.
- Die anatomisch geformte Pelotte sorgt für ein geringes Bandagengewicht. Sie bringt Positionssicherheit und erhöht den Tragekomfort.
- Der Korrekturzügel liegt lateral am Patellarand.
- Auf dem distalen Pelottenabschnitt befinden sich zwei Friktionspunkte.
- Der proximale Pelottenabschnitt reicht bis zum Muskel-Sehnenübergang des musculus vastus medialis.
- In der Pelottenaussparung für die Patella ist eine halbmondförmige mediale Patellaabdeckung integriert.
- Lateral am oberen Bandagenrand liegt die Detonisationspelotte (Weltneuheit).
- Die Pelotte bewirkt in Verbindung mit dem Korrekturzügel eine Zentrierung der Kniescheibe. Sie wirkt einem lateralen Abdriften der Patella entgegen.
- Nach einer Operation sichert der Korrekturzügel das Operationsergebnis.
- Die Friktionspunkte wirken druckentlastend und schmerzmindernd auf den retropatellaren Bereich.
- Die Wechselkompression der Bandage inkl. proximalen Pelottenabschnitt auf den musculus vastus medialis führt zur Schmerzreduzierung und regt den Stoffwechsel an. Die Propriozeption wird verbessert und unterstützt die Gelenkstabilität.
- Die mediale Patellaabdeckung wirkt beim lateralen Abdriften dem medialen Abkippen der Patella entgegen. Die Patella wird in der physiologischen Bewegung unterstützt.
- Die Detonisationspelotte bewirkt durch eine sensomotorische Rückkopplung eine leichte Entspannung des tractus iliopatellaris auf das retinaculum patellae laterale. Der laterale Zug auf die Patella wird so minimiert. Die Patella wird entlastet und der Schmerz verringert.
- Das weiche Kniekehलगestrick sorgt für einen angenehmen Tragekomfort bei medizinisch wirksamer Kompression.

Wirkweise

Farben

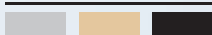

Detonisationspelotte



Korrekturzügel und Patellapelotte