

Askina® Pad | Pad S

Saugfähige Vliesstoffkomresse




TIPP

Netzartig, glänzende Polyesterfolie wundseitig auflegen! So wird ein Verkleben der Wundauflage mit der Wunde und dem Wundrand vermieden.

Askina® Pad Vliesstoffkompressen sind sehr weich und anschmiegsam und ermöglichen eine gute Polsterung der Wunde. Durch die so gesicherte Wundruhe kann ein schonender und schmerzärmer Verbandwechsel durchgeführt und der Heilungsprozess gefördert werden.

Das Drei-Schicht-System

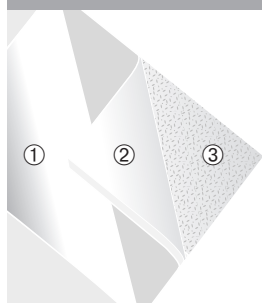

- 1. Schicht – Feste Vliesstoffoberseite**
Kein Fusseln des Polsters mehr möglich
- 2. Schicht – Mehrlagiges Baumwollacrylfaserpolster**
Besonders saugfähig, hohe Polsterwirkung
- 3. Schicht – Wundseite netzartige Polyesterfolie**
Kein Verkleben mit der Wunde, rascher Sekrettransport durch microfeines Gitternetz

Einsatzgebiete Askina® Pad

- › Absorbierende Wundauflage zur Versorgung von Hautwunden aller Art in der Traumatologie, Dermatologie und Chirurgie
- › Als sekundäre Wundauflage bei infizierten Wunden

Einsatzgebiete Askina® Pad S

Gebrauchsfertige Schlitzkomresse mit Lochstanzung zur Wundversorgung von

- › Kathetern (Drainagen, PEG-Sonden, suprapubischen Blasendrainagen, Infusionskathetern)
- › Draht- und Nagelextensionen

Askina® Pad	Abmessung	VE	PZN	REF
Pad	5 cm x 5 cm	25 Stück	6646045	9024000
	5 cm x 5 cm	100 Stück	6647346	9024018
	10 cm x 10 cm	10 Stück	6646051	9024026
	10 cm x 10 cm	100 Stück	6647352	9024034
	20 cm x 10 cm	100 Stück	6646068	9024042
Pad S	5 cm x 5 cm	30 Stück	0323536	9024050
	7,5 cm x 7,5 cm	30 Stück	0323542	9024069
	Lochdurchmesser 4,1 – 11 mm für Ch. 9 – 30			

