



## Bestellinformation

	Produkt	Nadel oder Klinge Stichtiefe/Blutmenge	Bestellnummer
	<b>MEDLANCE® plus Universal</b> Ideal zur Entnahme von Kapillarblut im Profibereich	Nadel 21G 1,8 mm 10 - 30 µl	7044 <b>200 Stk.</b> PZN 13166541  7144 <b>100 Stk.</b> PZN 13197464
	<b>MEDLANCE® plus Lite</b> Ideal für die Blutzuckermessungen im ambulanten Bereich	Nadel 25G 1,5 mm bis zu 10 µl	7043 <b>200 Stk.</b> PZN 1131566  7143 <b>100 Stk.</b> PZN 13197441
	<b>MEDLANCE® plus Super Lite</b> Die „Sanfte“ in der MEDLANCE®-Familie	Nadel 30G 1,2 mm 10 - 30 µl	7054 <b>200 Stk.</b> PZN 11191658  7154 <b>100 Stk.</b> PZN 12452983
	<b>MEDLANCE® plus Extra</b> Ideal bei verhornter Haut und größeren Blutmengen	Nadel 21G 2,4 mm 30 - 70 µl	7045 <b>200 Stk.</b> PZN 1131537  7145 <b>100 Stk.</b> PZN 13197470
	<b>MEDLANCE® plus Special</b> Die ultra-scharfe Klinge für große Blutmengen und die schnelle Wundheilung.	Klinge 0,8 mm 2 mm 70 - 100 µl	7046 <b>200 Stk.</b> PZN 6730030  7146 <b>100 Stk.</b> PZN 13197487

### Vertrieb


eu-medical GmbH | Bärensteiner Str. 27-29 | D-01277 Dresden  
info@eu-medical.de | www.eu-medical.de  
**Gebührenfreie Rufnummer 0800-5 88 80 56**

 **Hersteller:** HTL-STREFA S.A.  
Adamówek 7 | 95-035 Ozorkow Poland



## MEDLANCE<sup>®</sup><sub>plus</sub>

# Sicherheitslanzetten

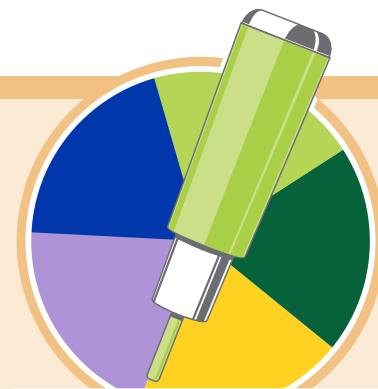

**Sanft und sicher -  
Sterile Sicherheitslanzetten**

- Erhältlich in der praktischen Spenderbox
- für Profis und rezeptierbar

### Ein sicheres Arbeitsgerät nach TRBA 250

- Doppelte Sicherheit bei der Blutentnahme
- Leicht zu bedienen
- Kaum zu spüren
- Für jede Anwendung der richtige Typ





**Doppelte Sicherheit bei der Blutentnahme.**  
Der Sicherheitsmechanismus verhindert eine versehentliche Auslösung der MEDLANCE® plus Lanzette. Ein weiterer Anstich ist nicht möglich. Sicherheit für den Profibereich.

**Leicht zu bedienen.**  
MEDLANCE® plus ermöglicht die sanfte und sichere Kapillarblutentnahme.


**Kaum zu spüren.**  
Die Nadel ist besonders fein und durch Silikonbeschichtung extraglatt.

**Für jede Anwendung der richtige Typ.**  
MEDLANCE® plus Sicherheitslanzetten sind sowohl für den Einsatz in Kliniken, Pflegeheimen, Ambulanzen und Labors als auch für den Hausgebrauch geeignet. Für verschiedene Anwendungszwecke sind verschiedene Ausführungen erhältlich – einfach farblich zu unterscheiden (siehe Rückseite).



## Gebrauchsanweisung

Einfach den Schutzstift abdrehen und herausziehen.

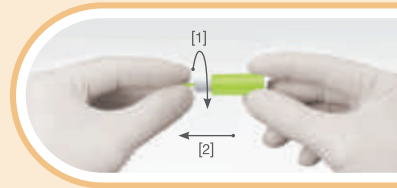

Das Gehäuse sanft auf die entsprechende Einstichstelle drücken. Die optimale Stichtiefe sichert MEDLANCE® plus durch den eingebauten Abstandshalter.



Sanft und mit kurzen Unterbrechungen neben die Einstichstelle drücken, so erhalten Sie problemlos die erwünschte Blutmenge.

